

cosmobelle



cavitation

your silhouette is up to you

Español
Português



Manual de usuario
Manual do utilizador
CB1500

cosmobelle



cavitation
your silhouette is up to you

MANUAL DE USUARIO

Enhorabuena, primeramente nos gustaría agradecerle la compra de SILUET W&M y la confianza depositada en Cosmobelle. A través de este práctico Manual de Usuario y siguiendo sus sencillas instrucciones usted conseguirá unos resultados comparables a los que obtendría de la mano de un profesional de la belleza.

Le recomendamos encarecidamente leer este Manual de Usuario de forma detenida, su lectura y comprensión le ayudará a utilizar SILUET W&M de una forma eficaz y segura.

CONTENIDOS

CAPÍTULO 1

- contenido de la caja
- ensamblaje de SILUET W&M

CAPÍTULO 2

- características básicas de SILUET W&M
- instrucciones de uso

CAPÍTULO 3

- modos de aplicación

CAPÍTULO 4

- para una correcta y segura aplicación de SILUET W&M

CAPÍTULO 5

- preguntas frecuentes sobre SILUET W&M

CAPÍTULO 6


- información importante de seguridad
- despiece
- certificados
- garantía
- especificaciones técnicas

CAPÍTULO 1

Contenido de la caja

En esta caja encontrará todo lo necesario para poder disfrutar de SILUET W&M desde este momento. Compruebe minuciosamente en la siguiente lista todos los elementos que debe contener su embalaje.

- Manual del usuario
- DVD
- Cuerpo central
- Manípulo
- Cable de conexión a la red
- Gel de Cavitación
- Loción post cavitación
- Serum reafirmante
- Serum anticelulítico

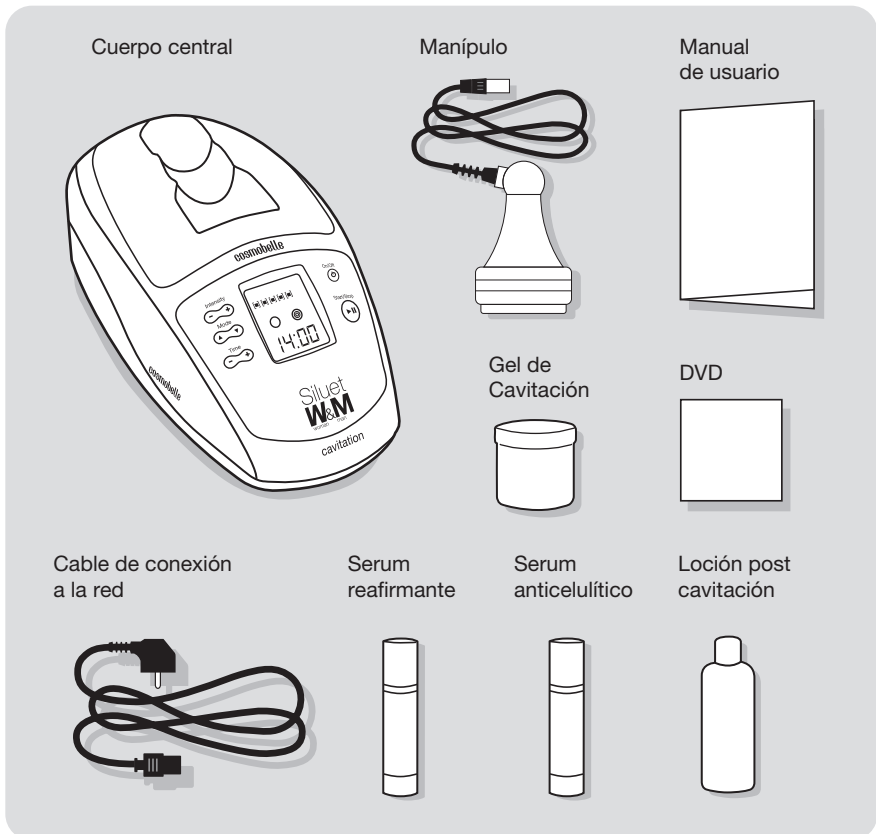

CAPÍTULO 2

Características básicas de Siluet W&M

SILUET W&M es un dispositivo de alta tecnología que nos permite eliminar de una forma selectiva y eficiente las acumulaciones de grasa localizada (celulitis, piel de naranja) de nuestro cuerpo.

La tecnología empleada es la de emisión de ultrasonidos, fenómeno físico conocido como cavitación, que provoca la eliminación de las células de grasa.

Esta tecnología de contrastados resultados, es ampliamente utilizada en centros de estética en todo el mundo para combatir de una forma indolora y no invasiva la celulitis.

Es

Características del modelo SILUET W&M

- Tiempo: Programable de 1 a 15 minutos.
- Intensidad: Programable en 6 niveles de intensidad.
- Modo: 1 modo pulsado y 1 modo continuo.

En esta unidad únicamente deberá preocuparse de programar de forma sencilla tres funciones: intensidad, tiempo y modo.

Con la intensidad controlamos el nivel de penetración de las ondas sonoras en su piel. A más intensidad, mayor será la profundidad que alcancen las ondas.

La función tiempo le ayudará a elegir los minutos que usted quiere trabajar con SILUET W&M. Por razones de seguridad, el tiempo que usted puede programar será de hasta 15 minutos que corresponde al tiempo máximo recomendado para trabajar una zona. Sin embargo, usted puede reducir ese tiempo máximo en intervalos de 1 minuto. Una vez finalizado el tiempo seleccionado, SILUET W&M le avisará con un pitido.




SILUET W&M también le permite elegir el modo de trabajo, que nos ayudará a seleccionar el intervalo de tiempo con el que las ondas llegan a nuestra piel. En el modo pulsado, las ondas son emitidas de forma intermitente, mientras en el modo continuo la emisión es ininterrumpida, por lo que el trabajo es mayor.

Instrucciones de uso de Siluet W&M

Precauciones: Antes de comenzar a utilizar este aparato consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas con problemas de salud. No es recomendable su uso en menores de 18 años. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.

Puesta en marcha

- Procederemos a conectar el manípulo al cuerpo central. Para ello tomaremos la clavija del manípulo y la insertaremos en la conexión situada en el cuerpo central indicada con la fig. 2.1
- Conecte el terminal del cable de conexión eléctrica al conector de la máquina y el otro enchúfelo a la red eléctrica (220V.) fig. 2.2
- Presione el interruptor que se encuentra detrás de la unidad para ponerla en marcha (posición I). Se encenderá una luz roja debajo de la pantalla. fig. 2.3
- Presione el botón **⏻ On/Off** para encender la máquina. Se encenderá la pantalla y una luz verde debajo de la misma.

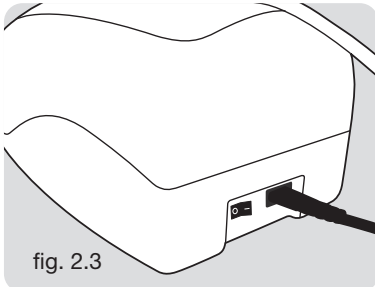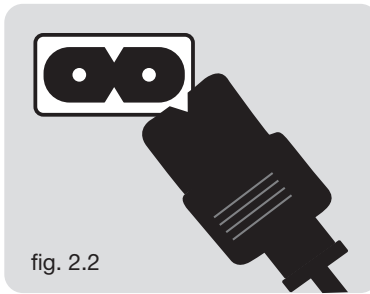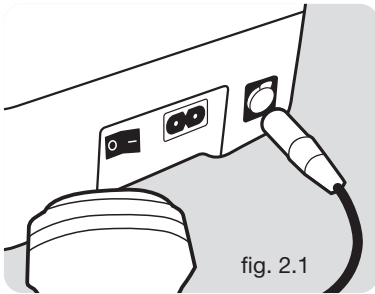

Elementos del monitor

El monitor de SILUET W&M está compuesto por una pantalla o display y cinco pulsadores o teclas.

- En el display se muestra información sobre la sesión de cavitación.
- Las teclas tienen las siguientes funciones:
 - **+** y **- Intensity** (cambio de intensidad)
 - **+** y **- Time** (ajuste de tiempo)
 - **▲** y **▼ Mode** (cambio de modo)
 - **⏻ On/Off** (encendido/apagado)
 - **▶|| Start/Stop** (inicio/fin)

Sesión de cavitación

Las variables que intervienen en el masaje son 3:

- **Tiempo:** mide en minutos y segundos la duración de la sesión. Tiene la posibilidad de elegir de 1 a 15 minutos (intervalos de 1 minuto).
- **Intensidad:** representa el nivel de intensidad de la sesión. SILUET W&M permite seleccionar entre 6 niveles.
- **Modo:** tipo de pulsados (frecuencia de emisión de impulsos). SILUET W&M permite seleccionar entre un modo continuo y un modo pulsado.

Comienzo de la sesión

Una vez conectada la máquina a la corriente eléctrica, puesto el interruptor en posición I y presionado el botón **On/Off**, aparecerán en el monitor por defecto, los siguientes parámetros de trabajo:

- Tiempo: 10 minutos (10:00)
- Intensidad: nivel 4 **■** **■** **■** **■**
- Modo: continuo **○**

A partir de aquí podrá modificar los parámetros tiempo, intensidad y modo en busca de la sesión deseada de la siguiente forma:

Variación de tiempo de la sesión

Una vez se encuentra en la pantalla con los parámetros seleccionados por defecto, puede modificar la duración de la sesión con las teclas **+** y **- (Time)**.

El valor que aparece por defecto es 10:00 (10 minutos) pero se puede modificar en intervalos de 1 minuto entre los valores 1:00 y 15:00.

Variación de la intensidad de masaje

Una vez seleccionado el tiempo deseado se podrá configurar la intensidad. Para ello debe pulsar las teclas **+** y **- (Intensity)**.

El nivel de intensidad que aparece por defecto o el de la última sesión, se pueden modificar seleccionando entre los niveles 1 y 6 (1 a 6 cuadrados). Se puede cambiar la intensidad durante el funcionamiento presionando las teclas **+** y **-**.

Variación del modo de trabajo

Puede modificar el modo de trabajo que desee para su sesión con las teclas **▲** y **▼ (Mode)**.

Por defecto la máquina trabaja en modo **continuo**, el cual se identifica con el círculo vacío parpadeante ubicado en la parte izquierda de la pantalla **○**. El modo **pulsado**, se identifica con el icono de círculos concéntricos ubicado en la parte derecha de la pantalla **◎**.

Finalmente, agarre firmemente el manipulador y colóquelo en la zona que desea trabajar y presione la tecla **On/Off** **⏻** para dar inicio a la sesión. Masajee como se indica en el DVD o en “modos de aplicación”.

Si desea parar la sesión, basta con presionar la tecla **Start/Stop** **▶||** y ésta detendrá la sesión, volviendo el contador al tiempo seleccionado previamente.

Cuando el contador del tiempo llegue a **0:00**, la unidad parará y emitirá un pitido para avisarle que ha terminado la sesión seleccionada. El contador volverá al tiempo seleccionado previamente.

CAPÍTULO 3

Modos de aplicación de Siluet W&M

Aplicáse siempre gel de forma abundante en la zona que desee trabajar y comience a tratarla deslizando el manípulo lentamente y sin apretar, tal como muestran los dibujos.

Si necesita adquirir gel o alguna de nuestras cremas de precavitación lo podrá hacer en el establecimiento donde compró SILUET W&M o consultar otros puntos de venta en la página web: www.cosmobelle.es

En cada uno de los apartados siguientes encontrará un cuadro con los protocolos de uso. Antes de empezar a usar el aparato, ud. deberá determinar en qué nivel de grasa se encuentra en cada zona donde se va a tratar.


Es

- A Gran acumulación de grasa de densidad alta
- B Gran acumulación de grasa de densidad media
- C Acumulación media de grasa de densidad media
- D Acumulación pequeña de grasa
- E Piel de naranja
- F Sesión de mantenimiento

Abdomen central

Recuerde que nunca debe aplicar SILUET W&M sobre el ombligo, pechos, zona torácica y zona genital.

Ponga gel de forma abundante sobre su abdomen y comience a trabajar la zona deslizando el manípulo lentamente y sin apretar, tal como muestra los dibujos.

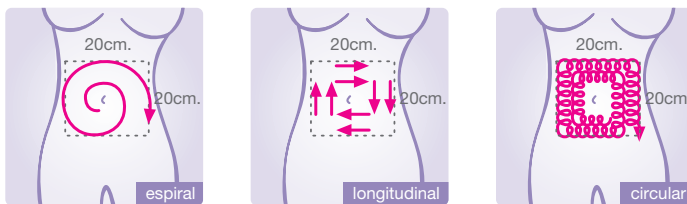

Para conseguir un mejor resultado, le recomendamos aplique SILUET W&M combinando las distintas técnicas de masaje (espiral, longitudinal, circular) en diferentes sesiones.

Le recomendamos recostarse para una más confortable aplicación de SILUET W&M.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	4	10'	⊙
B	4	10'	○
C	3	10'	○
D	2	8'	○
E	2	8'	○
F	1	8'	○

Flancos

Aplique gel sobre la piel de la zona a trabajar con SILUET W&M.




Tanto el masaje circular como el masaje longitudinal deberá aplicarse de arriba hacia abajo tal como muestran los dibujos. Es importante respetar las direcciones del masaje ya que con ello favorecemos el drenaje. Combine las distintas técnicas de masaje en diferentes sesiones.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	5	10'	○
B	5	10'	⊙
C	4	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Caderas

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET W&M.

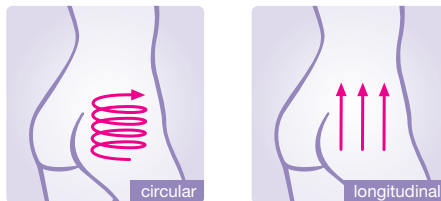


Tanto el masaje circular como el masaje longitudinal deberá aplicarse de abajo hacia arriba tal como muestran los dibujos. Durante el tratamiento incida sobre la zona de mayor acumulación de grasa.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	4	8'	⊙
B	4	8'	⊙
C	3	8'	⊙
D	3	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Glúteos

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET W&M.

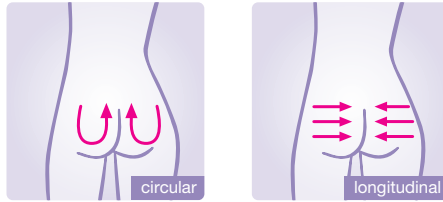

Es


Tanto el masaje longitudinal como circular deberá realizarse siguiendo el sentido de las flechas tal como se muestra en los dibujos.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	6	10'	○
B	6	10'	○
C	5	8'	⊙
D	4	8'	⊙
E	3	10'	⊙
F	1	10'	⊙

Interior del muslo

Recuerde no aplicar nunca SILUET W&M de la rodilla hacia el pie ya que en esa zona no se producen acumulaciones significativas de grasa.

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET W&M.

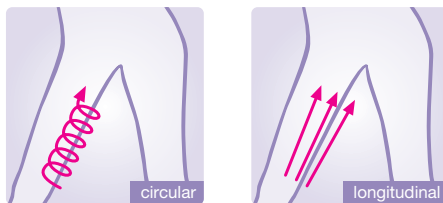


Tanto el masaje longitudinal como circular deberá realizarse de abajo hacia arriba, tal como muestran los dibujos. Seguir estas sencillas instrucciones le ayudara a una mejora en los resultados.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	4	10'	⊙
B	4	10'	⊙
C	3	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Interior rodilla

Recuerde no aplicar SILUET W&M sobre las articulaciones de las rodillas.

Aplique gel sobre la zona a trabajar con SILUET W&M.


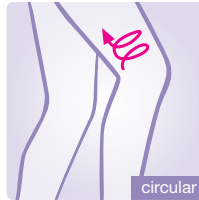


En esta zona aplicaremos un ligero masaje circular tal como se muestra en el dibujo.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	3	10'	⊙
B	3	10'	⊙
C	2	8'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Brazos

Recuerde nunca aplicar SILUET W&M en la zona de manos, antebrazo o articulaciones.

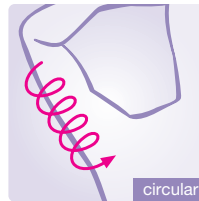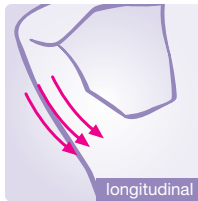

Asegúrese de poner gel de forma generosa en la zona que vaya a trabajar ya que mejorará la efectividad del tratamiento y evitara dañar la maquina.

Realice el masaje, deslizando el manipulo lentamente y sin apretar. El masaje de esta zona siempre se deberá aplicar en dirección hacia el cuerpo, tal como muestra el dibujo.

Nivel	Intensidad	Tiempo	Modo
A	3	8'	⊙
B	3	8'	⊙
C	2	5'	⊙
D	2	3'	⊙
E	1	3'	⊙
F	1	5'	⊙

CAPÍTULO 4

Para una correcta y segura aplicación de Siluet W&M

Es

Para una correcta y segura aplicación de SILUET W&M, debe tener en cuenta los siguientes tiempos de aplicación:

- **POR ZONA DE TRABAJO: máximo 15 minutos.**

Entendemos por “zona de trabajo” cada una de las partes de nuestro cuerpo donde podemos aplicarnos SILUET W&M. Las distintas zonas de trabajo son: brazos, abdomen, flancos, caderas, interior de muslos e interior de rodilla.

Ej: en una misma sesión se podrá realizar la aplicación de SILUET W&M durante 15 minutos en flancos y 15 minutos en brazos. Pero, por ejemplo, NUNCA debería realizarse en un mismo día una sesión de 30 minutos de aplicación sólo en flancos.

- **POR SESIÓN: máximo 30 minutos.**

Entendemos por sesión la aplicación de SILUET W&M en un mismo día en 2 zonas de trabajo diferentes (máximo de 15 minutos por zona).

- **ENTRE SESIONES: mínimo de 72 horas.**

Entendemos por “entre sesiones” el tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión. *Ej: en una semana, una planificación de sesiones (la máxima) sería: lunes, jueves y domingo.*

- **CADA 20 SESIONES: se deberá descansar durante 3 semanas.** Tras ese periodo se podrá repetir completamente el primer tratamiento, o bien comenzar el programa de mantenimiento.
- **SESIONES DE MANTENIMIENTO:** depende de cada individuo, pero una sesión al mes sería suficiente.

MUY IMPORTANTE

***** Nunca sobrepase los tiempos de aplicación (15 minutos por zona, 30 minutos en total al finalizar el día).** Su cuerpo no sabe “de dónde” está usted eliminando la grasa, por lo que no puede realizar en una sesión aplicaciones de 15 minutos en flancos y 15 minutos en piernas y 15 minutos en brazos, etc. **RECUERDE:** en total, el tiempo máximo en un día, sumando todas las partes del cuerpo a tratar, debe ser de 30 minutos.

***** Y, sobre todo, respete el tiempo de descanso de 72 horas entre sesiones.** Es el tiempo que su cuerpo necesita para eliminar a través del sistema linfático toda la grasa que ha sido disuelta durante la sesión.

CAPÍTULO 5

Preguntas frecuentes

¿Qué es la cavitación?

La cavitación es una técnica no invasiva (sin cirugía) para moldear el cuerpo, que reduce volumen eliminando la celulitis y los depósitos de grasa localizada en abdomen, caderas, flancos, brazos, cara interna de muslos y rodillas.

¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos?

La ventaja fundamental es que podemos elegir las zonas determinadas del cuerpo que queremos trabajar. Se puede decir que es una tecnología que nos permite trabajar la celulitis de forma selectiva.

¿Es la cavitación dolorosa?

El uso de SILUET W&M nunca debe provocar dolor.

¿Es normal escuchar un pequeño zumbido en los oídos durante el uso de SILUET W&M?

Sí, en algunos usuarios es posible que perciban un pequeño zumbido durante su aplicación.

¿Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo?

No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso se debe aplicar: sobre cabeza o cara, cuello, senos, zona torácica, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, tobillos ni ganglios.

¿Con SILUET W&M se pierde peso o volumen?

SILUET W&M elimina los cúmulos de materia grasa los cuales tienen peso y al mismo tiempo fruto de su desaparición nuestro cuerpo pierde volumen.

¿Es SILUET W&M efectivo con la piel de naranja?

Sí, SILUET W&M es eficaz con la piel de naranja al destruirse las células adiposas causantes del almacenamiento de grasa.

¿SILUET W&M sirve para quitar las arrugas?

SILUET W&M no es un sistema creado para la eliminación de arrugas.

¿Se puede usar SILUET W&M en la cara?

No se debe utilizar NUNCA SILUET W&M en la cara, ojos ni cuello.

¿Con cuántas sesiones se empiezan a ver los resultados?

Se deberían observar resultados a partir de las primeras cinco sesiones, sin embargo los resultados pueden variar dependiendo del sujeto.

¿Cuántos días debe esperarse entre sesión y sesión?

Se recomienda dejar 72 horas entre sesión y sesión.

¿Vuelve a aparecer la celulitis tras utilizar SILUET W&M?

Aunque SILUET W&M asegura eficacia y durabilidad a lo largo del tiempo no podemos garantizar que no vuelva a aparecer. Para evitar la nueva aparición de celulitis se recomienda una dieta equilibrada, beber mucho agua, la práctica regular de ejercicio físico y sesiones de mantenimiento con SILUET W&M.

¿Tiene efectos secundarios?

Si usted está sano, SILUET W&M no tiene ningún efecto secundario descrito, sin embargo en algunas personas puede producir un enrojecimiento en la piel que puede durar unas 2 horas.

¿Es necesario combinar SILUET W&M con alguna dieta?

No es necesario seguir ninguna dieta especial, sin embargo es altamente recomendable llevar una alimentación equilibrada e hidratarse convenientemente.

¿Cuánto agua debo beber?

Es imprescindible comenzar a hidratarse dos horas antes de aplicar SILUET W&M. También después de la finalizar es aconsejable seguir hidratándose. Se recomienda ingerir un mínimo de 2 litros durante estos periodos ya que ayuda a la eliminación de toxinas.

¿Es necesario combinar SILUET W&M con la práctica deportiva?

No es estrictamente necesario, pero la práctica de al menos 30 minutos de alguna actividad física potencia los resultados al ayudar al drenaje de líquidos.

¿Qué prácticas deportivas se complementan con SILUET W&M?

La plataforma vibratoria es el complemento ideal por sus cualidades tonificantes y drenantes. Pero si no tiene acceso a la plataforma, un paseo, bicicleta estática, natación u otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda.

¿Cómo puedo potenciar los efectos de SILUET W&M?

Conjugando una dieta equilibrada con la práctica habitual de deporte y la ingesta abundante de agua. Además los masajes de drenaje son de gran ayuda.

¿Para qué valen los geles anticelulítico y reafirmante? ¿Cuándo los uso?

1. Gel Anticelulítico: Contiene principios activos que ayudan a la eliminación de la celulitis.
2. Gel Reafirmante: Contiene principios activos que reafirman la zona tratada.

La secuencia de aplicación es la siguiente: durante los primeros días del tratamiento utilizamos el gel anticelulítico y una vez que se empiezan a notar los resultados, utilizamos el gel reafirmante. Se aplican antes del gel de cavitación, como cualquier otro serum. Se debe masajear la zona hasta que se absorba bien y luego se aplica abundante gel de cavitación, para comenzar la sesión.

¿Puedo utilizar SILUET W&M sin aplicar gel?

NUNCA, ya que el gel actúa como agente conductor de los ultrasonidos con su cuerpo. Si no utilizamos gel la aplicación de SILUET W&M pierde su efectividad y la máquina puede resultar seriamente dañada.

¿Puedo utilizar cualquier tipo gel?

Recomendamos utilizar únicamente gel COSMOBELLE ya que el uso de cualquier otro podría dañar la máquina.

¿Cuándo esta contraindicado el uso de SILUET W&M?

- Si se encuentra embarazada o cree estarlo.
- Si se encuentra en período de lactancia.
- Tratamientos de fertilidad.
- Si presenta cardiopatía de cualquier tipo.
- Si tiene problemas dermatológicos.
- Osteoporosis.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensión.
- Niveles de colesterol altos.
- Insuficiencias renales.
- Insuficiencias físicas.
- Implantes metálicos o prótesis.
- Implantes auditivos.
- Malformaciones físicas.
- Epilepsia.
- Tratamiento prolongado con medicamentos: anti-inflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antihistamínicos.
- Depresión.
- Tratamiento psiquiátrico o psicológico.
- Problemas hepáticos (hígado graso)....
- Colon irritable.
- Diabetes.

¿Puedo utilizar SILUET W&M si estoy embarazada?

No debe NUNCA usar SILUET W&M si está embarazada o cree estarlo.

¿Puedo usar SILUET W&M durante la lactancia?

No utilizar durante el periodo de lactancia.

¿Puedo aplicar SILUET W&M en los senos?

NUNCA se debe aplicar sobre los senos.

¿Puedo utilizar SILUET W&M durante la menstruación?

No es recomendable su aplicación durante ese período sobre la zona abdominal ya que puede producir un aumento del sangrado. Sin embargo puede aplicarse en otras zonas.

¿Puedo usar SILUET W&M llevando DIU?

Sí.

¿Puedo usar SILUET W&M sobre la piel tatuada?

No. Debe evitar pasar el manípulo sobre zonas tatuadas.

¿Puedo usar SILUET W&M si tengo implantes (clavos, etc)?

Puede usar SILUET W&M si tiene implantes siempre y cuando NO masajee nunca sobre estas zonas: por ejemplo, si el implante está en la rodilla, no habría problema en masajear el abdomen. Tampoco habrá problema si el implante está en la espalda, ya que nunca debe usar SILUET W&M en esta parte del cuerpo.

¿Puede afectar SILUET W&M a mis niveles colesterol?

El uso de SILUET W&M puede aumentar sus índices de colesterol.

¿Se puede usar SILUET W&M con afecciones de piel?

No se debe utilizar si tiene alguna afección en la piel. Consulte a su médico.

¿Puedo usar SILUET W&M si tengo implantes de oído?

No se debe utilizar en caso de tener implantes de oído.

¿Puedo usar SILUET W&M cuando me estoy bañando o duchando?

Bajo ningún concepto el manípulo ni la máquina deben entrar en contacto con el agua ya que existe el riesgo shock eléctrico.

¿Cómo debo limpiar SILUET W&M y el manípulo?

Para limpiar SILUET W&M o el manípulo, nunca los sumerja en agua. Utilice un paño ligeramente humedecido con agua.

CAPÍTULO 6

Información importante de seguridad

No modifique el enchufe que incluye el aparato. Si no encaja en la toma eléctrica, solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija similar a la que se muestra en la **Fig. 5.1**

Siga estas recomendaciones:

1. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
2. No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado.
3. Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
4. Nunca utilice la máquina al aire libre.
5. Para desenchufar, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la red.




Protección

Este modelo está dotado de una protección electrónica de parada automática para una óptima conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protección se activará (fusible) si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento anormal.

Si esto ocurriese:

1. Desconecte la unidad de la red eléctrica
2. Ponga el interruptor (L), situado en el lateral de la máquina, en la posición «0» (OFF) **fig. 5.2**
3. Desatornille la carcasa exterior de la máquina
4. Cambie el fusible (1 Amp) que se encuentra dentro del portafusibles, ubicado al lado del conector de cable de red **fig. 5.3**
5. Conecte la unidad a un enchufe. Ponga el interruptor (L) en posición «I» (ON) **fig. 5.2**

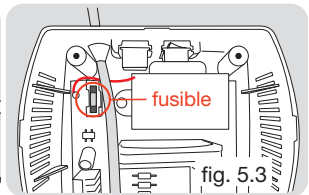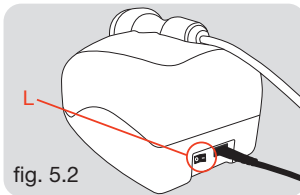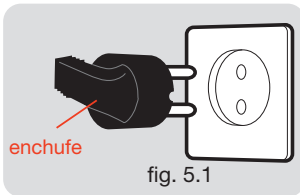

Garantía

Sugerimos que lea atentamente este ejemplar para conocer con exactitud la cobertura de la garantía otorgada por el fabricante y sus responsabilidades como propietario.

Garantías

INFORMACIÓN GENERAL

EXERCYCLE, S.L., como distribuidor de Cosmobelle, desea agradecerle la compra de este producto y la confianza que ha depositado en nosotros. Nuestros productos han sido sometidos a un riguroso control de calidad. No obstante, si tuviera algún problema con este aparato durante el periodo de garantía, le rogamos leer atentamente las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor autorizado de su zona.

El presente certificado de garantías ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo.

En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto en los siguientes términos y condiciones:

1. PERIODO DE GARANTÍA

El producto amparado por este certificado está protegido durante un período de DOS (2) AÑOS contados desde la entrega del producto, entendiéndose por tal la fecha que figura en el ticket o factura justificada de la compra del producto, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuese posterior. Es imprescindible, para posibles reparaciones la presentación de la misma. La política respecto al período de garantía puede variar entre países diferentes. El período de garantía indicado es solamente aplicable para Europa.

2. DERECHOS QUE CUBRE LA GARANTÍA

- Reparación o sustitución del producto que, en su caso, se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la finalidad que tuviera para el consumidor.
- Se exceptúan aquellos supuestos en los que la reparación o sustitución imponga al vendedor costes que no sean razonables en comparación con otras formas de saneamiento, cuando las mismas no perjudiquen al consumidor.
- Las reparaciones serán gratuitas para el consumidor en los conceptos de mano de obra, desplazamiento y materiales.
- En el caso de reparación o sustitución de una máquina por otra nueva, el plazo de garantía se suspende temporalmente hasta la entrega de ese nuevo aparato y se dispondrá siempre como mínimo de 6 meses de garantía, pero en ningún caso empieza un periodo nuevo de 2 años.

- Así mismo, se producirá una (i) rebaja del precio o se procederá a la (ii) resolución del contrato, a elección del consumidor, cuando la reparación o sustitución no se hayan llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La (i) rebaja del precio, será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. La (ii) resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

3. LA GARANTÍA NO CUBRE

- Defectos atribuibles al empleo diferente al establecido en el Manual de Usuario.
- El uso a título profesional o el arrendamiento a título comercial del producto.
- Mala instalación, mal montaje o rotura de piezas por montaje inadecuado, (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso de la máquina).
- Uso indebido del producto (utilización sin aplicación de gel, exceder tiempos de utilización, exposición a humedad demasiado elevada, etc) o problemas derivados de una falta de mantenimiento (acumulación de suciedad en cualquier parte del producto o sus accesorios, etc) (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso del producto).
- Reparaciones realizadas por personal no autorizado por EXERCYCLE, S.L. o aparatos abiertos o manipulados por personas no autorizadas por el fabricante.
- Desviaciones del producto estándar, como ligeras vibraciones, ruidos o roturas de piezas que no afecten al funcionamiento de su máquina y que no sean atribuibles a un defecto de fabricación.
- Arañazos, rasguños, abrasiones, golpes, caídas, etc, provocadas por un mal cuidado.
- Defectos en el aparato causados por daños en el transporte del mismo.

4. VIA DE RECLAMACIÓN

- La acción para reclamar por falta de conformidad prescribe a los tres años desde la entrega del bien.
- El consumidor debe informar de la existencia del defecto en el plazo de 2 meses a contar desde que tuvo conocimiento de su existencia.
- Esta Garantía no afecta a otros derechos legales del consumidor, conforme a la legislación vigente, si bien es incompatible con el ejercicio de otras acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos en la compraventa..
- Para cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de la interpretación o ejecución de la presente garantía, se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de aplicación.

Cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación, validez y ejecución de este contrato, será los juzgados y tribunales de la ciudad de Vitoria.


Certificados

Por medio de la presente Exercycle S.L., como distribuidor de Cosmobelle, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.


Despiece

Es

2 Manípulo

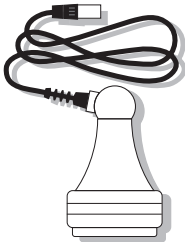

16 Cable de conexión a la red

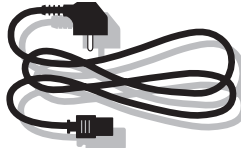

G01 Cuerpo central



Para pedir un repuesto indicar:

Modelo de la máquina	Nº correspondiente a la pieza	Cantidad
----------------------	-------------------------------	----------

Ejemplo:

CB1500	16	1
--------	----	---

Especificaciones técnicas

Peso Neto: 2.3 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 32 x 17 x 13 cm

F. Ultrasonidos: 40 Khz

Potencia de salida: 5 a 20 W (según programa)

Fuente de alimentación:

- Frecuencia: 50 Hz.
- Voltaje: AC 220 V.

cosmobelle



cavitation
your silhouette is up to you

MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de mais, gostaríamos de apresentar as nossas felicitações pela compra da SILUET W&M e agradecer a confiança depositada na Cosmobelle. Através deste prático Manual do Utilizador e seguindo as suas simples instruções conseguirá obter resultados comparáveis aos que obteria entregando-se aos cuidados de um profissional da beleza.

Recomendamos encarecidamente a leitura atenta e minuciosa deste Manual do Utilizador, o qual proporcionará a utilização da SILUET W&M de uma forma eficaz e segura.

CONTEÚDOS

CAPÍTULO 1

- conteúdo da embalagem
- montagem da SILUET W&M

CAPÍTULO 2

- características básicas da SILUET W&M
- instruções de utilização

CAPÍTULO 3

- modos de aplicação

CAPÍTULO 4

- para uma correcta e segura aplicação da SILUET W&M

CAPÍTULO 5

- perguntas frequentes sobre a SILUET W&M

CAPÍTULO 6


- informação importante de segurança
- componentes
- certificados
- garantia
- especificações técnicas

CAPÍTULO 1

Conteúdo da caixa

Nesta embalagem encontrará tudo o que necessita para poder usufruir da sua SILUET W&M a partir deste momento. Comprove minuciosamente com a seguinte lista todos os elementos que a sua embalagem deve conter.

- Manual do utilizador
- DVD
- Corpo central
- Manípulo
- Cabo de ligação à rede
- Gel de Cavitação
- Loção pós-cavitação
- Sérum reafirmante
- Sérum anticelulítico

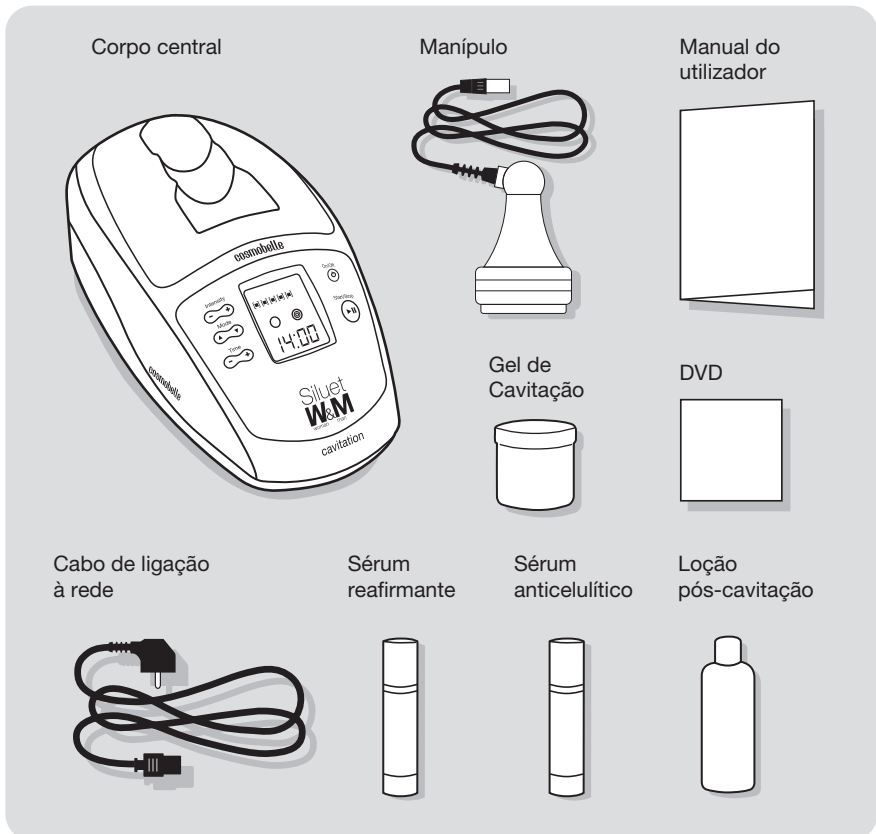

CAPÍTULO 2

Características básicas da Siluet W&M

A SILUET W&M é um dispositivo de alta tecnologia que nos permite eliminar de uma forma selectiva e eficiente as acumulações de gordura localizada (celulite, pele de laranja) do nosso corpo.

A tecnologia utilizada é a emissão de ultra-sons, fenómeno físico conhecido como cavitação, que provoca a eliminação das células de gordura.

Esta tecnologia com resultados comprovados é amplamente utilizada nos centros de estética de todo o mundo para combater a celulite de uma forma indolor e não invasiva.

Características do modelo SILUET W&M

- Tempo: Programável de 1 a 15 minutos.
- Intensidad: Programável em 6 níveis de intensidade.
- Modo: 1 modo palpitação e 1 modo contínuo.

Nesta unidade apenas deverá preocupar-se em programar de forma simples três funções: intensidade, tempo e modo.

Com a intensidade controlamos o nível de penetração das ondas sonoras na sua pele. Com mais intensidade, maior será a profundidade de penetração e o alcance das ondas.


A função tempo ajudará a escolher o período de tempo em minutos de operação da SILUET W&M. Por razões de segurança, o período máximo de tempo que o aparelho permite programar é de até 15 minutos, que corresponde ao período de tempo máximo recomendado para trabalhar uma determinada zona. No entanto, poderá reduzir o referido período máximo de tempo em intervalos de 1 minuto. Uma vez finalizado o período de tempo seleccionado, a SILUET W&M emitirá um sinal de aviso sonoro.




A SILUET W&M também permite escolher o modo de trabalho, que nos ajudará a seleccionar o intervalo de tempo com que as ondas chegam à nossa pele. No modo de palpitação as ondas são emitidas de forma intermitente, enquanto no modo contínuo essa emissão é ininterrupta, pelo que o trabalho é mais intenso.

Instruções de utilização da Siluet W&M

Precauções: Antes de começar a utilizar este aparelho, consulte o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com problemas de saúde. O uso deste aparelho não é recomendado para menores de 18 anos. Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.

Colocação em funcionamento

- Procede-se à ligação do manípulo com o corpo central. Para isso, inserir a ficha do manípulo na ligação situada no corpo central indicado com a Fig. 2.1
- Ligar o terminal do cabo de ligação eléctrica interruptor da máquina à respectiva ficha na máquina e o terminal de alimentação à tomada da rede eléctrica (220V) Fig. 2.2
- Premir o interruptor que se encontra por trás da unidade para a ligar (posição I). A luz indicadora vermelha que se encontra por baixo do ecrã acender-se-á. Fig. 2.3
- Premir o botão  On/Off para ligar a máquina. Acender-se-á o ecrã e a luz indicadora verde que se encontra por baixo deste.

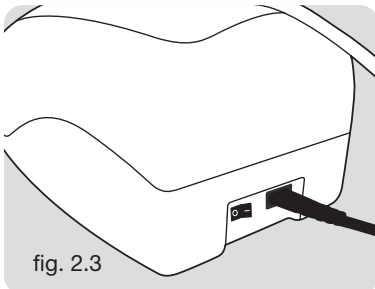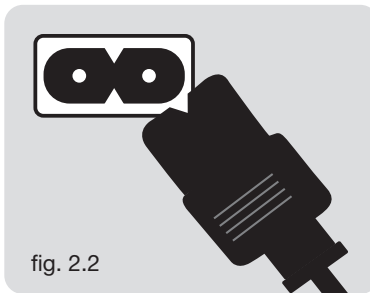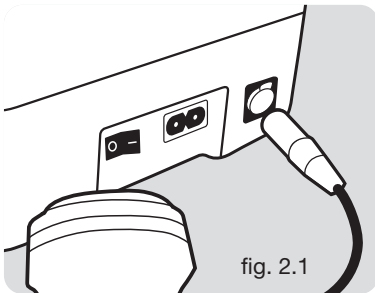

Elementos do monitor

O monitor da SILUET W&M é composto por um ecrã ou monitor com cinco botões ou teclas.

- No monitor é apresentada a informação sobre a sessão de cavitação.
- As teclas têm as seguintes funções:
 - **+** e **-** **Intensity** (Intensidade) Regulação da intensidade
 - **+** e **-** **Time** (Tempo) Regulação do período de tempo
 - **▲** e **▼** **Mode** (Modo) Alteração de modo de funcionamento
 - **⏻** **On/Off** (Ligar/Desligar)
 - **▶||** **Start/Stop** (Iniciar/Parar)

Sessão de cavitação

As variáveis que intervêm na massagem são 3:

- **Tempo:** mede em minutos e segundos a duração da sessão. Permite escolher um período entre 1 e 15 minutos (em intervalos de 1 minuto).
- **Intensidade:** representa o nível de intensidade da sessão. A SILUET W&M permite seleccionar entre 6 níveis.
- **Modo:** tipo de palpitações (frequência de emissão de impulsos). A SILUET W&M permite seleccionar entre um modo contínuo e um modo de palpitações.

Início da sessão

Uma vez que o aparelho esteja ligado à corrente eléctrica, colocar o interruptor na **posição I** e premir o botão **On/Off**, por predefinição são apresentados no monitor os seguintes parâmetros de trabalho:

- Tempo: 10 minutos (10:00)
- Intensidade: nível 4 **[■][■][■][■]**
- Modo: contínuo **○**

A partir deste ecrã poderá modificar os parâmetros tempo, intensidade e modo, procurando da seguinte forma o tipo de sessão desejada:

Varição do período de tempo da sessão

Uma vez que se encontra no ecrã com os parâmetros seleccionados por defeito, pode modificar a duração da sessão utilizando as teclas **+** e **- (Time)**.

O valor apresentado por defeito é 10:00 (10 minutos), no entanto, pode ser modificado em intervalos de 1 minuto entre os valores 1:00 e 15:00.

Varição da intensidade da massagem

Uma vez seleccionado o período de tempo desejado, poderá configurar a intensidade. Para isso deverá premir as teclas **+** e **- (Intensity)**.

O nível de intensidade apresentado por defeito é o da última sessão; no entanto este pode ser modificado, seleccionando entre os níveis 1 e 6 (1 a 6 quadrados). A intensidade pode ser alterada durante o funcionamento premindo as teclas **+** e **-**.

Varição do modo de trabalho

Pode modificar o modo de trabalho que deseje para a sua sessão utilizando as teclas **▲** e **▼ (Mode)**.

Por predefinição, o aparelho trabalha em modo contínuo, o qual é identificado com o círculo vazio intermitente situado na parte esquerda do ecrã **○**. O modo **palpitações** é identificado com o ícone de círculos concêntricos localizados na parte direita do ecrã **◎**.

Finalmente, agarre firmemente o manípulo, coloque-o na zona que deseja trabalhar e pressione a tecla **On/Off** **⏻** para dar início à sessão. Efectuar a massagem da forma indicada no DVD ou no capítulo “modos de aplicação”.

Se desejar parar a sessão, basta pressionar a tecla **Start/Stop** **▶ ||** e desta forma deterá a sessão, voltando o contador a apresentar o período de tempo previamente seleccionado.

Quando o contador de tempo chegar a **0:00**, o aparelho parará e emitirá um aviso sonoro que o avisa que a sessão seleccionada terminou. O contador voltará a apresentar o período de tempo previamente seleccionado.

CAPÍTULO 3

Modos de aplicação do Siluet W&M

Aplique sempre o gel de forma abundante na zona que desejar trabalhar e comece o tratamento nessa zona deslizando lentamente o manípulo e sem apertar, tal como mostram os desenhos.

Se necessitar adquirir gel ou algum dos nossos cremes de pré-cavitação poderá fazê-lo no estabelecimento onde adquiriu a SILUET W&M ou consultar outros pontos de venda na seguinte página Web: www.cosmobelle.es

Em cada um dos seguintes capítulos encontrará um quadro com os protocolos de utilização. Antes de começar a utilizar o aparelho, deverá determinar o nível de gordura em que se encontra cada uma das zonas onde vai efectuar o tratamento.


Pt

- A** Grande acumulação de gordura de alta densidade
- B** Grande acumulação de gordura de média densidade
- C** Acumulação média de gordura de média densidade
- D** Pequena acumulação de gordura
- E** Pele de laranja
- F** Sessão de manutenção

Abdómen central

Recorde que nunca deve aplicar a SILUET W&M sobre o umbigo, seios, zona torácica e zona genital.

Aplique sempre o gel de forma abundante sobre o seu abdómen e comece o tratamento deslizando lentamente o manípulo e sem apertar, tal como mostram os desenhos.

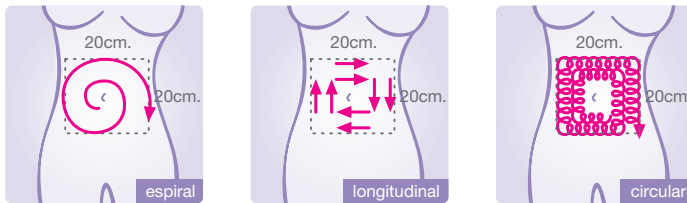

Para obter um melhor resultado, recomendamos que aplique o SILUET W&M combinando várias técnicas de massagem (espiral, longitudinal e circular) em sessões diferentes.

Recomendamos que se encoste para que a aplicação do SILUET W&M seja mais confortável.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	4	10'	☉
B	4	10'	○
C	3	10'	○
D	2	8'	○
E	2	8'	○
F	1	8'	○

Flancos

Aplice gel sobre a pele da zona a trabalhar com a SILUET W&M.




Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverá ser aplicada de cima para baixo, tal como mostram os desenhos. É muito importante respeitar as direcções da massagem, porque, desta forma, favorecemos a drenagem. Combine as diferentes técnicas de massagem em diferentes sessões.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	5	10'	○
B	5	10'	⊙
C	4	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Ancas

Aplice gel sobre a pele da zona a trabalhar com a SILUET W&M.

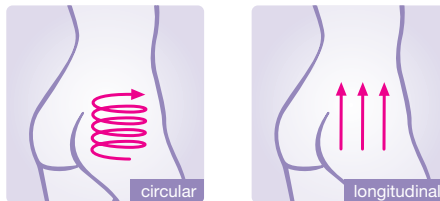


Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverá ser aplicada de baixo para cima, tal como mostram os desenhos. Durante o tratamento incida sobre a zona de maior acumulação de gordura.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	4	8'	⊙
B	4	8'	⊙
C	3	8'	⊙
D	3	8'	⊙
E	2	5'	⊙
F	1	5'	⊙

Glúteos

Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a SILUET W&M.

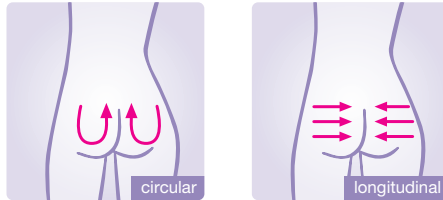

Pt


Tanto a massagem longitudinal como a massagem circular deverá ser executada seguindo o sentido das setas de orientação, tal como mostram os desenhos.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	6	10'	○
B	6	10'	○
C	5	8'	⊙
D	4	8'	⊙
E	3	10'	⊙
F	1	10'	⊙

Interior da coxa

Recorde-se de nunca aplicar a SILUET W&M dos joelhos até aos pés, porque nessa zona não se produzem acumulações significativas de gordura.

Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a SILUET W&M.

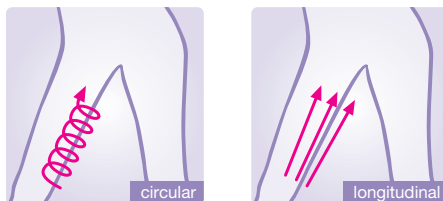


Tanto a massagem longitudinal como a massagem circular deverá ser efectuada de baixo para cima, tal como mostram os desenhos. Seguir estas simples instruções ajudará a obter melhores resultados.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	4	10'	⊙
B	4	10'	⊙
C	3	10'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Interior do joelho

Recorde-se de nunca aplicar a SILUET W&M sobre as articulações dos joelhos.

Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a SILUET W&M.


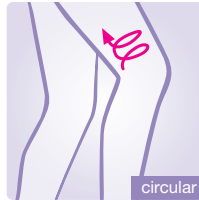


Nesta zona aplicaremos uma ligeira massagem circular, tal como é apresentado no desenho.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	3	10'	⊙
B	3	10'	⊙
C	2	8'	⊙
D	2	8'	⊙
E	1	8'	⊙
F	1	8'	⊙

Braços

Recorde-se de nunca aplicar a SILUET W&M nas zonas das mãos, antebraço ou nas articulações.

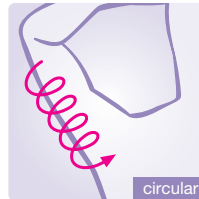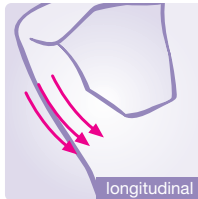

Assegure-se de aplicar gel de forma abundante na zona que vai massajar, o que melhorará a eficácia do tratamento e evitará danos na máquina.

Efectue a massagem deslizando o manipulo lentamente e sem apertar. A massagem desta zona deverá ser sempre aplicada no sentido do corpo, conforme mostra o desenho.

Nível	Intensidade	Tempo	Modo
A	3	8'	⊙
B	3	8'	⊙
C	2	5'	⊙
D	2	3'	⊙
E	1	3'	⊙
F	1	5'	⊙

CAPÍTULO 4

Para uma correcta e segura aplicação da Siluet W&M

Pt

Para uma correcta e segura aplicação da SILUET W&M, deverá ter em conta os seguintes períodos de tempo de aplicação:

- **POR ZONA DE TRABALHO: máximo 15 minutos.**

Entendemos por “zona de trabalho” cada uma das partes do nosso corpo onde podemos aplicar a SILUET W&M. As diferentes zonas de trabalho são: braços, abdómen, flancos, ancas, interior das coxas e interior dos joelhos.

Por exemplo: Na mesma sessão, poderá efectuar a aplicação da SILUET W&M durante 15 minutos nos flancos e 15 minutos nos braços. No entanto, NUNCA deverá efectuar no mesmo dia uma sessão de 30 minutos de aplicação, por exemplo, apenas nos flancos.

- **POR SESSÃO: máximo 30 minutos.**

Entendemos por sessão a aplicação da SILUET W&M num mesmo dia em 2 zonas de trabalho diferentes (com um máximo de 15 minutos por cada zona).

- **INTERVALO ENTRE SESSÕES: mínimo de 72 horas.**

Entendemos por “intervalo entre sessões” o período de tempo que deve decorrer entre uma sessão e a seguinte. *Por exemplo: Numa semana, uma planificação de sessões (no máximo) seria: segunda-feira, quinta-feira e domingo.*

- **CADA 20 SESSÕES: deverá efectuar um período de descanso de 3 semanas.** Após esse período, poderá repetir completamente o primeiro tratamento ou então, começar o programa de manutenção.
- **SESSÕES DE MANUTENÇÃO:** dependem de cada indivíduo, mas uma sessão por mês é considerado suficiente.

MUITO IMPORTANTE

***** Nunca ultrapasse os períodos de tempo de aplicação indicados (15 minutos por zona e 30 minutos no total, por dia).** O seu corpo não sabe “de onde” está a eliminar a gordura, pelo que não pode efectuar na mesma sessão aplicações de 15 minutos nos flancos, 15 minutos nas pernas, 15 minutos nos braços, etc. **RECORDE-SE:** No total, o período de tempo máximo num dia, somando todas as partes do corpo a tratar, deverá ser de 30 minutos.

***** E, sobretudo, respeite o período de tempo de descanso de 72 horas entre sessões.** Este período de 72 horas é o tempo que o seu corpo necessita para eliminar toda a gordura que foi dissolvida durante a sessão através do sistema linfático.

CAPÍTULO 5

Perguntas frequentes

O que é a cavitação?

A cavitação é uma técnica não invasiva (sem cirurgia) que permite moldar o corpo, reduzindo o volume, eliminando a celulite e os depósitos de gordura localizados no abdómen, nas ancas, nos flancos, nos braços, nas faces internas das coxas e nos joelhos.

Que vantagens tem sobre outros métodos?

A vantagem fundamental é que podemos escolher as zonas determinadas do corpo em que queremos trabalhar. Podemos dizer que se trata de uma tecnologia que nos permite trabalhar a celulite de forma selectiva.

A cavitação é dolorosa?

A utilização da SILUET W&M nunca deverá provocar dor.

É normal escutar um pequeno zumbido nos ouvidos durante a utilização da SILUET W&M?

Sim, é possível que alguns utilizadores escutem um pequeno zumbido durante a aplicação da SILUET W&M.

Pode ser utilizada em todas as partes do corpo?

Não pode ser aplicada em todas as partes do corpo. Em nenhum caso deve ser aplicada: sobre a cabeça ou a cara, pescoço, seios, zona torácica, umbigo, antebraço, articulações, genitais, costas, joelhos ou gânglios.

Com a SILUET W&M perde-se peso ou volume?

A SILUET W&M elimina as acumulações de matéria gorda que têm peso e simultaneamente, como fruto da sua eliminação, o nosso corpo perde volume.

A SILUET W&M é eficaz para tratar a pele de laranja?

Sim, a SILUET W&M é eficaz para tratar a pele de laranja, porque destrói as células adiposas causadoras do armazenamento de gordura.

A SILUET W&M serve para eliminar as rugas?

A SILUET W&M não é um sistema concebido para a eliminação de rugas.

A SILUET W&M pode ser utilizada na cara?

NUNCA se deve utilizar a SILUET W&M na cara, nos olhos e no pescoço.

Com quantas sessões começam a ser visíveis os resultados?

Podem ser observados resultados a partir das primeiras cinco sessões - no entanto, estes podem variar de pessoa para pessoa.

De quanto tempo é o intervalo entre sessões?

Recomenda-se aguardar 72 horas de intervalo entre sessões.

Após utilizar a SILUET W&M a celulite volta a aparecer?

Embora a SILUET W&M assegure eficácia e durabilidade ao longo do tempo, não podemos garantir que esta não volte a aparecer. Para evitar o reaparecimento da celulite recomenda-se seguir uma dieta equilibrada, beber muita água, a prática regular de exercício físico e efectuar sessões de manutenção com a SILUET W&M.

Tem efeitos secundários?

Tratando-se de uma pessoa saudável, a SILUET W&M não tem qualquer efeito secundário descrito; no entanto, em algumas pessoas, pode ocorrer um avermelhamento da pele que poderá durar até cerca de 2 horas.

É necessário combinar a SILUET W&M com algum tipo de dieta?

Não é necessário seguir nenhum tipo de dieta em especial; no entanto, é altamente recomendável seguir uma alimentação equilibrada e hidratar-se convenientemente.

Que quantidade de água se deve beber?

É imprescindível começar a hidratação duas horas antes de aplicar a SILUET W&M. Também depois de finalizar a aplicação é aconselhável continuar com a hidratação. Recomenda-se ingerir um mínimo de 2 litros durante estes períodos, porque ajuda na eliminação das toxinas.

É necessário combinar a SILUET W&M com alguma prática desportiva?

Não é estritamente necessário, mas a prática de pelo menos 30 minutos de qualquer actividade física potencia os resultados, porque ajuda na drenagem de líquidos.

Que práticas desportivas complementam a aplicação da SILUET W&M?

A plataforma vibratória é o complemento ideal devido às suas qualidades tonificantes e drenantes. Se não tem acesso a uma plataforma vibratória, um passeio, a bicicleta estática, natação ou outro exercício aeróbio realizado durante um mínimo de 30 minutos são de grande ajuda.

Como posso potenciar os efeitos da SILUET W&M?

Conjugando uma dieta equilibrada com a prática habitual de desporto e a ingestão de água em abundância. Para além disso, as massagens de drenagem são de grande ajuda.

Qual a função do gel anticelulítico e do gel reafirmante? Quando os devo utilizar?

1. Gel Anticelulítico: Contém princípios activos que ajudam a eliminar a celulite.
2. Gel Reafirmante: Contém princípios activos que reafirmam a zona tratada.

A sequência de aplicação é a seguinte: durante os primeiros dias de tratamento utiliza-se o gel anticelulítico e quando se começam a notar resultados, utiliza-se o gel reafirmante. São aplicados antes do gel de cavitação, como qualquer outro sérum. A zona de aplicação deve ser massajada até que absorva bem o gel, em seguida e para iniciar a sessão, aplica-se o gel de cavitação em abundância.

Pode-se utilizar a SILUET W&M sem aplicar gel?

NUNCA, porque o gel com o seu corpo actua como agente condutor dos ultra-sons. Não utilizando gel, a aplicação da SILUET W&M perde a sua eficácia e o aparelho pode ficar seriamente danificado.

Pode-se utilizar qualquer tipo de gel?

Recomendamos utilizar apenas o gel COSMOBELLE, porque a utilização de qualquer outro poderia danificar o aparelho.

Em que situações a utilização da SILUET W&M está contra-indicada?

- Estando grávida ou suspeitando que possa estar.
- Estando em período de aleitamento.
- Tratamentos de fertilidade.
- Se apresenta cardiopatias de qualquer tipo.
- Se tem problemas dermatológicos.
- Osteoporose.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensão.
- Níveis altos de colesterol.
- Insuficiências renais.
- Insuficiências físicas.
- Implantes metálicos ou próteses.
- Implantes auditivos
- Malformações físicas.
- Epilepsia.
- Tratamento prolongado com medicamentos: anti-inflamatórios, anticoagulantes, antibióticos ou anti-histamínicos.
- Depressão.
- Tratamento psiquiátrico ou psicológico.
- Problemas hepáticos (fígado gordo), etc.
- Cólon irritable.
- Diabetes.

Posso utilizar a SILUET W&M se estiver grávida?

NUNCA deverá utilizar a SILUET W&M se estiver grávida ou suspeitar que possa estar.

A SILUET W&M pode ser utilizada durante o período de aleitamento?

NUNCA deverá utilizar a SILUET W&M durante o período de aleitamento.

Posso aplicar a SILUET W&M nos seios?

NUNCA se deve aplicar a SILUET W&M sobre os seios.

A SILUET W&M pode ser utilizada durante o período de menstruação?

Não é recomendável a sua aplicação durante esse período sobre a zona abdominal, porque poderá produzir um aumento do fluxo de sangue. No entanto, pode ser aplicada noutras zonas do corpo.

Posso utilizar a SILUET W&M usando o DIU (Dispositivo Intra-Uterino)?

Sim.

A SILUET W&M pode ser utilizada sobre uma zona de pele tatuada?

Não. Deve evitar-se passar o manípulo sobre zonas da pele tatuadas.

Posso utilizar a SILUET W&M se tiver próteses implantadas (parafusos, placas, etc.)?

Pode usar a SILUET W&M se tiver próteses implantadas desde que NÃO massage sobre essas zonas: por exemplo, se a prótese está implantada no joelho, não existe qualquer contra-indicação em massajar o abdómen. Também não terá qualquer problema se a prótese estiver implantada nas costas, porque NUNCA deverá utilizar a SILUET W&M nesta parte do corpo.

A SILUET W&M pode afectar os meus níveis de colesterol?

A utilização da SILUET W&M poderá aumentar os seus índices de colesterol.

Posso utilizar a SILUET W&M se tiver infecções na pele?

A SILUET W&M não deve ser utilizada se tiver infecções na pele. Deverá consultar o seu médico.

Posso utilizar a SILUET W&M se tiver próteses implantadas no ouvido?

A SILUET W&M não deve ser utilizada no caso de ter implante de ouvido.

Posso utilizar a SILUET W&M enquanto estiver a tomar banho ou duche?

Em nenhuma circunstância quer o manípulo quer o aparelho devem entrar em contacto com a água, porque existe o sério risco de electrocussão.

Como devo proceder à limpeza da SILUET W&M e do manípulo?

Para limpar a SILUET W&M ou o manípulo, nunca os submerja em água. Utilize sempre um pano ligeiramente humedecido com água.

CAPÍTULO 6

Informação importante de segurança

Não modifique a ficha eléctrica fornecida com o aparelho. Se esta não encaixar na tomada eléctrica, solicite a um electricista a instalação de uma tomada adequada.

Este produto deve ser utilizado num circuito de 220-240V e dispõe de uma ficha similar à apresentada na **Fig. 5.1**

Siga estas recomendações:

1. Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
2. Não utilize o aparelho caso o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado.
3. Mantenha o cabo de alimentação eléctrica afastado de superfícies quentes.
4. Nunca utilize o aparelho ao ar livre.
5. Para desligar o aparelho, coloque o interruptor na posição «0» e depois, desligue o cabo da rede eléctrica.




Protecção

Este modelo está dotado de uma protecção electrónica de paragem automática para uma conservação adequada dos circuitos, tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protecção será activada (fusível) se a unidade for submetida a um esforço ou sobreaquecimento anormal.

Se eventualmente ocorrer, deverá:

1. Desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica.
2. Colocar o interruptor (L) situado na parte lateral do aparelho, na posição «0» (OFF) **fig. 5.2**
3. Desaparafuse a carcaça exterior do aparelho
4. Substitua o fusível (1 Amp) que se encontra dentro do porta-fusíveis, situado ao lado da ligação do cabo de rede **fig. 5.3**
5. Ligue o aparelho a uma tomada de corrente adequada. Coloque o interruptor (L) na posição «1» (ON) **fig. 5.2**

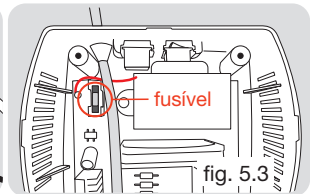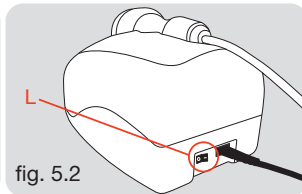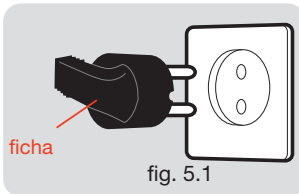

Garantia

Sugerimos que leia atentamente este exemplar para conhecer com exactidão a cobertura da garantia concedida pelo fabricante e as suas responsabilidades como proprietário.

Garantias

INFORMAÇÃO GERAL

A EXERCYCLE, S.L., como distribuidor da Cosmobelle, quer agradecer a compra deste produto e a confiança depositada. Os nossos produtos foram submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. No entanto, se ocorrer algum problema com este aparelho durante o período de garantia, solicitamos que leia atentamente as condições de garantia e contacte com o distribuidor autorizado da sua zona.

O presente certificado de garantia foi redigido em conformidade com o disposto na Directiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos da venda e garantia dos bens de consumo, incorporada na legislação espanhola em virtude da Lei 23/2003, de 10 de Julho, de garantias na venda de bens de consumo.

Neste sentido, a EXERCYCLE, S.L., com o NIF B-01029032 e sediada em Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garante este produto nos seguintes termos e condições:

1. PERIODO DE GARANTIA

O produto a que se refere este certificado está protegido durante um período de DOIS (2) ANOS contados a partir da data de entrega do produto, entendendo-se por tal a data que figura na factura justificada da compra do produto ou da guia de entrega correspondente, se for essa a data posterior. Para eventuais reparações é imprescindível a apresentação da mesma. A política relativamente ao período de garantia pode variar entre países. O período de garantia indicado apenas é aplicável na Europa.

2. DIREITOS COBERTOS PELA GARANTIA

- Reparação ou substituição do produto que, se for o caso, será efectuada num prazo razoável e sem maiores inconvenientes para o consumidor, tendo em conta o tipo de produto e a finalidade que este tiver para o consumidor.
- Exceptuam-se as situações em que a reparação ou substituição impliquem para o vendedor custos que não sejam razoáveis quando comparados com outras formas de solucionar o problema e estas não prejudiquem o consumidor.
- As reparações serão gratuitas para o consumidor no que se refere a mão-de-obra, deslocações e materiais.
- Em caso de uma eventual reparação ou da substituição de um aparelho por outro novo, o prazo de garantia é temporariamente suspenso até à entrega do novo aparelho, que disporá sempre, como mínimo, de 6 meses de garantia - em caso algum recomeçará um novo período de garantia de 2 anos.

- Da mesma forma, proceder-se-á a uma (i) redução do preço ou à resolução do contrato (ii), conforme a escolha do cliente, quando a eventual reparação ou substituição não tenha sido efectuada num prazo razoável ou sem maiores inconvenientes para o consumidor. A redução do preço (i) será proporcional à diferença existente entre o valor que o bem tinha no momento da entrega em conformidade com o estipulado no contrato e o valor que o bem efectivamente entregue tinha no momento da referida entrega. A resolução do contrato (ii) não procederá nos eventuais casos em que a falta de conformidade seja de escassa importância.

3. A GARANTIA NÃO COBRE

- Defeitos ou avarias atribuíveis a utilização diferente do estabelecido no Manual de Utilizador.
- A utilização a título profissional ou o arrendamento a título comercial do produto.
- Instalação e/ou montagem deficiente e/ou inadequada, rotura de peças derivada dessa instalação/montagem, (verificar o Manual de Utilizador, onde estão detalhadas as recomendações para a instalação e utilização adequada do aparelho).
- Uso indevido do produto (utilização sem aplicação de gel, exceder tempos de utilização, exposição a níveis de humidade demasiado elevados, etc.) ou problemas derivados de falta de manutenção, como por exemplo: acumulação de sujidade em qualquer parte do aparelho ou dos seus acessórios, etc. (verificar o Manual de Utilizador, onde estão detalhadas as recomendações para a instalação e utilização adequada do aparelho).
- Reparações efectuadas por pessoal não autorizado pela EXERCYCLE, S.L. ou aparelhos abertos ou manipulados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Desvios do produto standard, como ligeiras vibrações, ruídos ou roturas de peças que não afectem o normal funcionamento do aparelho e que não sejam atribuíveis a um defeito de fabrico.
- Riscos, arranhões, golpes, quedas, etc., provocadas por utilização descuidada.
- Avarias ou defeitos de funcionamento causados por danos ocorridos durante o transporte do mesmo.

4. VIA DE RECLAMAÇÃO

- A acção para reclamar por falta de conformidade prescreve após três anos a contar da data da entrega do bem.
- O consumidor deverá informar a existência do defeito num prazo de 2 meses a contar do momento em que teve conhecimento da sua existência.
- Esta Garantia não afecta outros direitos legais do consumidor, conforme a legislação vigente, embora seja incompatível com o exercício de outras acções derivadas do saneamento por defeitos ocultos no momento da aquisição.
- Para todas as questões emergentes motivadas pela interpretação ou execução da presente garantia, será aplicável o estabelecido na legislação nacional em vigor e que seja de aplicação.

Qualquer discrepância que possa surgir da interpretação, validade e execução deste contrato submeter-se-á ao Foro e aos Tribunais da cidade de Vitoria (Espanha).


Certificados

Pela presente, Exercycle S.L. como distribuidor de Cosmobelle, declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pelas Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE.


Peças

Pt

2 Manípulo

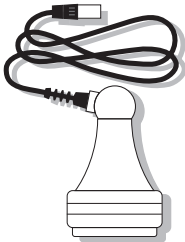

16 Cabo de ligação à corrente eléctrica

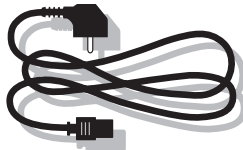

G01 Corpo central



Para pedir uma peça de substituição, por favor indique:

Modelo
da máquina

Nº correspondente
à peça

Quantidade

Ejemplo:

CB1500	16	1
--------	----	---

Especificações técnicas

Peso Líquido: 2.3 kg

Dimensões (comprimento x largura x altura): 32 x 17 x 13 cm

F. Ultra-sons: 40 KHz

Potência de saída: 5 a 20 W (conforme programa)

Fonte de alimentação:

- Frequência: 50 Hz
- Voltagem: AC 220 V

cosmobelle



CB1500

Fecha de compra / Data de compra

Comprado en / Comprado em

Datos del comprador / Dados do comprador

Sello del distribuidor / Carimbo do distribuidor

Por favor, conserve la factura como comprobante de compra /
Por favor, conserve a factura como prova de compra

Distribuido por / Distribuído por:

TECNOVITA BY BH

c/ Perretagana, 10 · C.T.V. Júndiz • 01015 VITORIA (Spain)

Tel.: +34 945 15 88 18 • Fax: +34 945 15 78 43

e-mail: info@bhwellness.es

SERVICIO POST-VENTA ESPAÑA

Tel.: +34 945 292 012 / 902 170 258 • Fax: +34 945 56 05 27

MAQUINASPORT, S.A.

Z.I. Assequins s/n • Giesteira Terreirinho • 3750-325 ÁGUEDA

(Portugal) • Tel.: +351 234 729 510 • Fax: +351 234 729 519

e-mail: info@bhfitness.pt

SERVIÇO PÓS-VENDA PORTUGAL

Tel.: +351 707 22 55 24 • Fax: +351 234 729 519

e-mail: info@bhfitness.pt

www.cosmobelle.es